

PRESSEMITTEILUNG

SOTAX-Gruppe lanciert den FT 2 Tabletten-Friabilitätstester in neuem Design

Februar 2015: Der Tabletten-Friabilitätstester (Abriebtester) FT 2, ursprünglich ein Produkt der Marke SOTAX, wird nun unter der Marke Dr. Schleuniger® Pharmatron neu lanciert. Der erfolgreich im Markt etablierte FT 2 Tabletten-Friabilitätstester ist ab sofort im bekannten Dr. Schleuniger® Pharmatron Design verfügbar. Seine Robustheit, anwenderfreundliche Bedienung und die den GMP/GLP-Vorschriften entsprechenden Reports bleiben als Haupt-Features des FT 2 erhalten.

Der FT 2 besitzt einen wartungsfreien Antrieb mit einstellbarer Geschwindigkeit von (20 - 50 Upm) und ermöglicht ein ruckfreies Starten und Anhalten der Trommel. Die Trommeln bestehen aus antistatischem Material und besitzen eine feste Kupplung mit dem Antrieb, um unerwünschten Schlupf zu vermeiden.

Bei Test-Start bewegt sich die Trommel automatisch für die Beladung der Tabletten in die richtige Position. Eine Öffnung in der antistatischen Trommel erlaubt die konventionelle Befüllung der Trommel ohne diese vom Gerät entfernen zu müssen. Bei Test-Ende werden die Tabletten automatisch in einem Auffangbehälter gesammelt.

Die Gewichtsbestimmung erfolgt vor und nach jedem Test entweder manuell oder automatisch mit einer angeschlossenen Analysenwaage. Neben den Test-Parametern beinhaltet der Report auch Zeit und Datum, die Seriennummer des Geräts sowie Eingabe-Felder für Anwender-Namen und Produktinfos.

Die q-doc prolab® PC Software komplettiert das System und ermöglicht es dem Anwender Daten aller SOTAX und Dr. Schleuniger® Pharmatron Geräte zu sammeln und zu verwalten – von Bruchfestigkeits-, Zerfallzeit-, Fließfähigkeits-Testern bis hin zu Stampfdichte-Prüfgeräten. Zusätzlich können weitere Instrumente wie analytische Waagen, Messschieber oder Feuchtemessgeräte angeschlossen werden.

Um Messdaten von verschiedenen Instrumenten zu sammeln, müssen in einer netzwerkfähigen Umgebung Batches nur einmal registriert werden. Messergebnisse und Batch-Reporte können dann, falls gewünscht, direkt in q-doc prolab® in elektronischer Form bewertet und freigegeben werden – Import-/Export-Funktionen für LIMS Systeme sind ebenfalls verfügbar.

Weitere Informationen: www.sotax.com/FT2




Bilder:

Oben:

- *Links FT 2 Friabilitätstester*
- *Rechts: FT 2 Friabilitätstester*

Unten:

- *Links: iButton Navigation*

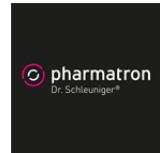

Über Dr. Schleuniger® Pharmatron:

Dr. Schleuniger® Pharmatron ist eine Produktmarke der SOTAX Gruppe. Mit mehr als 20'000 Tablettenhärte-Testern weltweit und mehr als 40 Jahren Erfahrung ist die Dr. Schleuniger® Pharmatron Härtetester-Technologie weltweit bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Die SOTAX Gruppe ist ein international führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Geräten zur Wirkstofffreisetzung, automatisierte Probenvorbereitung und Prüfung physikalischer Parameter von pharmazeutischen Darreichungsformen. Mit einem globalen Service-Netzwerk ist die SOTAX Gruppe auch ein zuverlässiger Partner für Installation, Wartung, Reparatur und Qualifizierung seiner SOTAX, Dr. Schleuniger® Pharmatron und ex-ZyMark Produkte.

Pressekontakt:

SOTAX AG	Kontakt:	Frau Petra Silbereisen
Nordring 1	Telefon:	+41 61 487 54 54
4147 Aesch	E-mail:	info@sotax.com
Schweiz	Web:	www.sotax.com